

Balance Chaos Logic



Electromagnetics

Οδηγός Χρήσης

Οδηγός Χρήσης

Προς τους σχετικούς χρήστες

Αγαπητέ χρήστη,

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το SPE FR600! Προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτόν τον Οδηγό χρήσης.

Μας τιμά η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε ως πελάτης μας. Για να είμαστε σίγουροι ότι σύντομα θα γνωρίζετε πολύ καλά το χειρισμό του SPE FR600, έχουμε καταρτίσει για εσάς τον παρόντα Οδηγό χρήσης. Το παρόν εγχειρίδιο έχει καταρτιστεί έτσι ώστε να είναι πολύ απλό και κατανοητό. Από αυτό το εγχειρίδιο μπορείτε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση των παραμέτρων του συστήματος, τα βήματα εγκατάστασης και τις βασικές λειτουργίες.


Συνιστάται θερμά να διαβάσετε προσεκτικά το εγχειρίδιο, για να χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν. Θα σας διευκολύνει πραγματικά να χρησιμοποιήσετε καλύτερα τις συσκευές SPE FR600, SPE FR400 και SPE FR200.

Προσπαθήσαμε όσο το δυνατόν περισσότερο να αποφύγουμε ανθρώπινα λάθη, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στο εγχειρίδιο είναι ακριβείς και αξιόπιστες. Ωστόσο, δεν μπορούμε να σας εγγυηθούμε πλήρως ότι δεν υπάρχουν λάθη, τα οποία διέφυγαν της προσοχής μας πριν την εκτύπωση. Παρακαλούμε δείξτε κατανόηση για τυχόν παραλείψεις, τις οποίες δεν μπορέσαμε να ελέγξουμε κατά την εκτύπωση ή τη διανομή.

Καθώς προσπαθούμε να βελτιώσουμε την πλήρη απόδοση και την αξιοπιστία των συσκευών μας, τα στοιχεία του υλικού και του λογισμικού ενδέχεται να χρειάζονται μικρές ρυθμίσεις. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορεί να προκύψει ασυνέπεια μεταξύ του πραγματικού εξοπλισμού και των πληροφοριών που αναγράφονται στο εγχειρίδιο, γεγονός που δεν θα επηρεάσει ουσιαστικά τη χρήση.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία!

Πρόσοψη Συσκευής

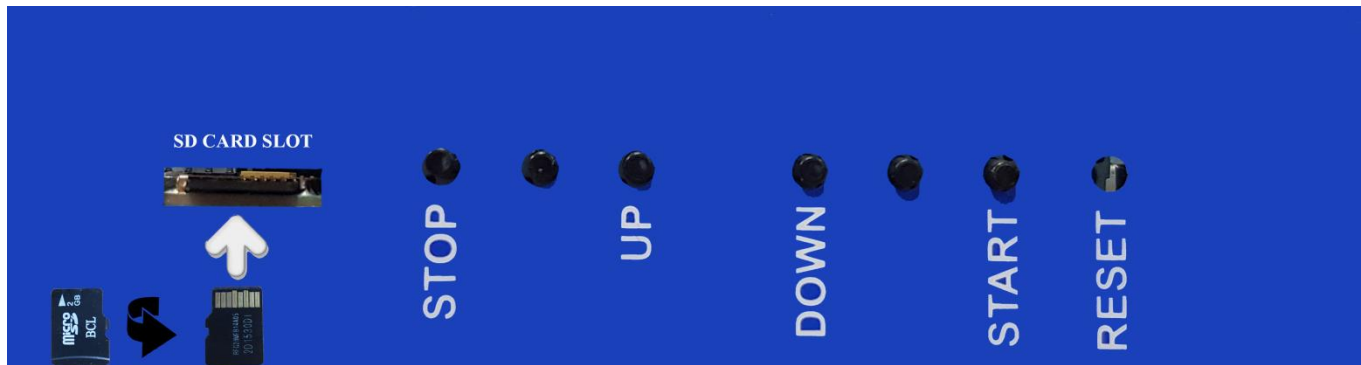

Εικόνα 1

ΚΟΥΜΠΙΑ

1. **START** ξεκινά την λειτουργία της συσκευής
2. **STOP** σταματά προσωρινά την λειτουργία της συσκευής
3. **DOWN** επιλογή προγράμματος (προς τα κάτω της λίστας)
4. **UP** επιλογή προγράμματος (προς τα πάνω της λίστας)

ΧΡΗΣΗ

Όταν έχετε ανοιχτή την συσκευή , στην οθόνη φαίνεται το πρόγραμμα που εκτελείται. Εάν για οποιοδήποτε λόγο θελήσετε να αλλάξετε πρόγραμμα τότε σταματάτε την λειτουργία προσωρινά πατώντας το κουμπί **STOP** διαλέγετε πρόγραμμα πατώντας τα κουμπιά **UP** ή **DOWN** και αφού έχετε επιλέξει το πρόγραμμα που θέλετε να εκτελεστεί τότε πατάτε το κουμπί **START** ξεκινώντας και πάλι την λειτουργία της συσκευής.

ΠΡΟΣΟΧΗ ! ΑΛΛΑΓΗ SD ΚΑΡΤΑΣ

Η αλλαγή SD κάρτας να γίνεται όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.


Κατά την έναρξη της συσκευής

Τοποθετήστε την SD κάρτα (εικόνα 1), συνδέστε τη συσκευή με τη τροφοδοσία και βεβαιωθείτε ότι το κουμπί του αντάπορα τροφοδοτικού είναι στην θέση "1" (εικόνα 2).



Εικόνα 2

Η συσκευή θα κάνει τον αυτόματο έλεγχο κατά την εκκίνηση, εάν όλα λειτουργούν σωστά θα σας εμφανίσει το μήνυμα **Found 1 ή 2 ή 3 FPGA's** ανάλογα με την συσκευή που έχετε αγοράσει 200hz, 400hz ,600hz αντίστοιχα, όπως στην παρακάτω εικόνα (εικόνα 3). Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή εάν εμφανίσει **μικρότερο αριθμό FPGA's** από αυτόν που θα έπρεπε, για παράδειγμα εάν έχετε αγοράσει την συσκευή FR600 και το μήνυμα στην οθόνη εμφανίσει **"Found 2 ή 1 FPGA's"**, τότε κλείστε την συσκευή από το κουμπί (εικόνα 2) και ξανά ανοίξτε την. Εάν συνεχιστεί το σφάλμα τότε παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την εταιρία μας.

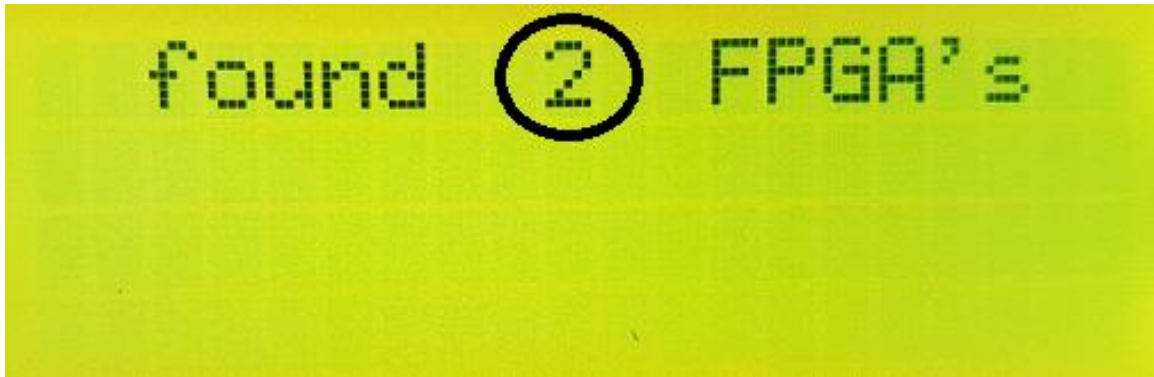

Εικόνα 3



Εικόνα 4



Εικόνα 5

Ύστερα ξεκινάει η εκτέλεση των προγραμμάτων που βρίσκονται μέσα στην SD κάρτα. Τα ονόματα των προγραμμάτων που εκτελούνται φαίνονται στην 1^η σειρά της οθόνης, στην 2^η εμφανίζονται τα steps του κάθε προγράμματος και ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης του καθενός, στην 3^η σειρά εμφανίζεται το τρέχον step και δίπλα ο χρόνος ολοκλήρωσης του και στην τελευταία σειρά ενημερώνεστε για το πόσες φορές έχει

εκτελεστεί ο κύκλος προγραμμάτων καθώς και η κατάσταση λειτουργίας της κάρτας, δηλαδή όταν η κατάσταση της συσκευής γράφει "Stepping"(Εικόνα 4) σημαίνει ότι το πρόγραμμα εκτελείται κανονικά, αν εμφανίζεται το "Stopped"(Εικόνα 5) σημαίνει ότι έχει σταματήσει προσωρινά η εκπομπή (αυτό συμβαίνει μόνο όταν πατήσει ο χρήστης το κουμπί "Stop"), εάν επιθυμείτε να συνεχιστεί η εκτέλεση των προγραμμάτων απλά πατήστε το κουμπί Start. Το step μεταβάλλεται ή όχι, εξαρτώμενο από το λογισμικό που υπάρχει στην SD κάρτα

Ειδοποίηση : Η SD κάρτα λήγει μετά από ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα(συνήθως ενός χρόνου). Όταν περάσει αυτό το χρονικό όριο τότε η κάρτα απενεργοποιείται και εμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα "**SD ERROR - REPLACE**"! Σε αυτή την περίπτωση επικοινωνήστε με την εταιρία μας για ανανέωση της κάρτας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

BCL ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΕ

Πόλη : Χαλκίδα

Λεωφόρος Γεωργίου Παπανδρέου

Τηλέφωνο : 22210-75241

Ιστοσελίδα : www.bcl-spe.com

Email : info@bcl-spe.com

Copyright © 2012

